



Powered by **ARSOFT**

LAIA XR v.1.0.0

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Soporte Técnico:
support@laiaxr.com



Dirección Legal y
Sede Operativa:
C/ del Adaja 10,
37185 Villamayor - España



Teléfono:
(+34) 923 49 65 22



Escanea este
QR y escríbenos
en laiaxr.com

Nº Edición: 02
Fecha Publicación: 18/09/26

CE FDA
0051 Cleared

FASE ESCRITORIO - PC

Paso 1

>>> INICIO Y ACCESO RÁPIDO <<<



LAIA XR

User...

Password...

Login


- 1) Enciende el PC y abre el acceso directo de LAIA XR.
- 2) Acepta el aviso para profesionales sanitarios.
- 3) Introduce tus credenciales, y pulsa "Enter" o "Acceder".

DESCARGA DESDE PACS

- a) Accede al estudio del paciente desde tu PACS.
- b) Descarga el estudio DICOM. *(En ocasiones se descarga un archivo para descomprimir.)*
- c) Se creará una carpeta de imágenes. *(Recuerda la ubicación de esta carpeta.)*

Paso 2


>>> PACIENTE Y ESTUDIO <<<

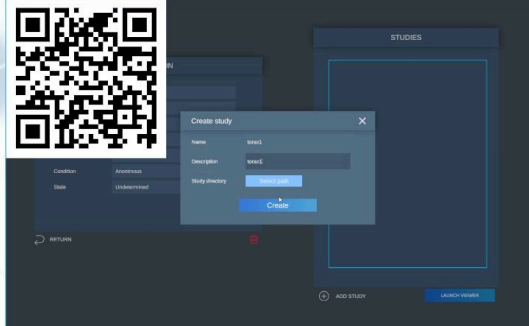

- 4) Ve a "Pacientes" > "Añadir paciente".
- 5) Completa los datos y selecciona el paciente creado.
- 6) Ve a "Estudios" > "Añadir estudio".
- 7) Completa los datos y adjunta el DICOM. *(CD-ROM o USB.)*
- 8) Selecciona el estudio y pulsa "Lanzar visualizador".

Paso 3

>>> DENTRO DE LAIA XR <<<

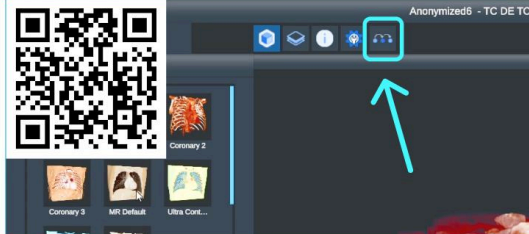


- 9) Espera a que cargue el caso, y acepta el aviso final si aparece.
- 10) Manipula el modelo 3D y los cortes.
- 11) Crea la Planificación Quirúrgica. *(Accede mediante el botón que indica la flecha.)*

FASE REALIDAD VIRTUAL - RV

Paso 4


>>> PREPARACIÓN RV <<<

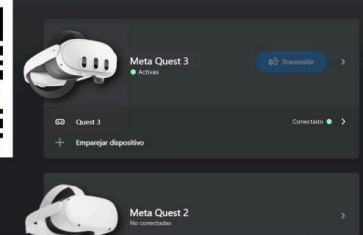

- 1) Abre la aplicación "Meta Horizon Link" en el PC.
- 2) Enciende las gafas "Meta Quest".
- 3) Conecta las gafas al PC mediante el cable, y espera a su conexión.

Paso 5


>>> CONEXIÓN CON LAIA XR <<<

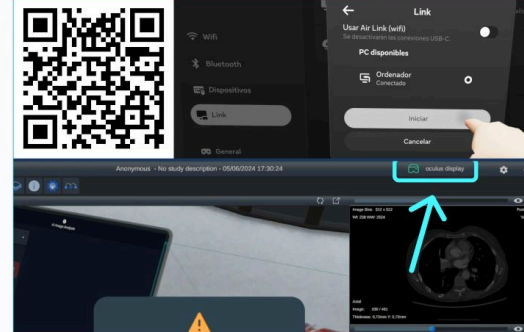

- 4) Ponte las gafas de RV.
- 5) Conecta las gafas al PC mediante "Link" en "Ajustes", dentro de la sala RV de Meta.
- 6) En LAIA XR "Escritorio", pulsa el botón de conexión a RV.
- 7) Espera hasta poder ver el modelo en 3D del paciente. *(NO te quites las gafas durante la conexión.)*

Paso 6

>>> INTERACCIÓN BÁSICA <<<

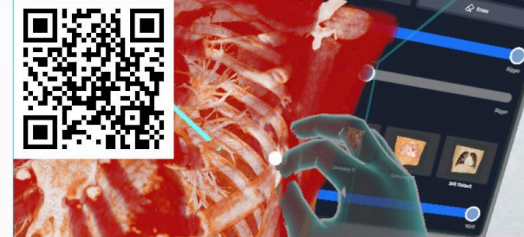

- 8) Explora la anatomía y mejora tu comprensión gracias a la RV.
- 9) Finaliza la revisión. Ya puedes quitarte las gafas para salir del modo RV.

ESCANEA EL CÓDIGO QR - ACCEDE A LA VIDEOGUÍA COMPLETA

Consulta todos los vídeos de la guía rápida y sigue el proceso paso a paso gracias a este QR: desde el acceso en PC hasta la revisión en RV.

